


ИНСТРУКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

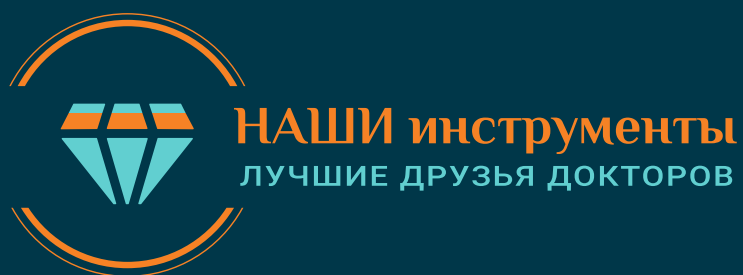

Инструкция по стерилизации инструментов

Инструменты поставляются в нестерильном виде.

На рабочих частях инструментов надеты защитные трубки из силикона медицинского. Защитная трубка перед обработкой должна быть снята. Перед применением инструменты должны быть подвергнуты циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Многократная обработка не ухудшает качества инструментов. Окончание срока службы определяется износом и повреждениями инструментов.

Изделия и анодно-окисное покрытие изделий могут быть повреждены химическими растворами, содержащими щелочь или кислоту. Необходимо использовать растворы только с нейтральным pH на основе:

- Формалина;
- Гигасепта;
- Септодор-форте.

Дезинфекция: после использования, с инструментов необходимо смыть следы крови и других органических остатков проточной водой, с соблюдением противоэпидемических мер.

ВНИМАНИЕ! Загрязненные инструменты следует обрабатывать в перчатках, должна использоваться защита для глаз.

Дезинфекцию необходимо проводить одним из методов:

- химический метод: инструмент помещают в дезинфицирующий раствор с нейтральным pH, соблюдая режим выдержки и рекомендации, указанные производителем дезинфицирующего средства. Затем инструмент необходимо промыть проточной водой;

- воздушный метод: проводят сухим горячим воздухом при температуре $120\pm 3^{\circ}\text{C}$, время выдержки 45+5 мин.

Очистка: для удаления органических остатков инструмент необходимо погрузить в специальный раствор, который растворяет органические остатки, подвергнуть ультразвуковой очистке в течение 10 мин., промыть проточной питьевой водой, затем промыть в дистиллированной воде

в течение 0,5 мин. Проверить, не осталось ли остатков. При необходимости повторить очистку. Чтобы избежать возникновения коррозии, после очистки необходимо немедленно высушить инструмент при температуре 85°C до полного исчезновения влаги.

Не рекомендуется применять для очистки кислоту, перекись водорода, т.к. они ухудшают качество инструментов.

Стерилизация: инструменты необходимо стерилизовать и хранить отдельно друг от друга в стерилизационных коробках-укладках, подставках или подносах.

Перед стерилизацией необходимо положить инструмент в стерилизационные коробки-укладки, подставки или подносы.

Простерилизовать паром в автоклаве по одному из режимов:

Вид стерилизации	Температура / давление	Время выдержки
Стерилизация паром в автоклаве	$(134 \pm 1)^{\circ}\text{C} / (0,21 \pm 0,01)\text{МПа}$	5 мин
Стерилизация паром в автоклаве	$(121 \pm 1)^{\circ}\text{C} / (0,11 \pm 0,01)\text{МПа}$	20 мин

ВНИМАНИЕ! Стерилизуя большое количество инструментов за один цикл, убедитесь, что максимальная загрузка автоклава не превышена.

После стерилизации инструменты (коробки-укладки с инструментами) поместить в контейнеры, обеспечивающие сохранение стерильности.



SIMKO

Официальный поставщик продукции «Наши инструменты»

Группа компаний «СИМКО»

www.simkodent.ru

+7-495-737-80-04

+7 977-726-83-13 (What's App, Telegram, MAX)

orders@simkodent.ru